

OPATRA®

L O N D O N



PULSE

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihr NEW PULSE-Schönheitsgerät entschieden haben. Dieses Hightech-Gerät nutzt fortschrittliche Elektro-Muskel-Stimulation (EMS), Infrarot- und LED-Therapie sowie Ultraschall-Vibrationsmassage in einem kleinen, leicht zu bedienenden Handgerät. Die clevere Kombination von Technologien in diesem Gerät zielt auf die Epidermis, die Dermis und die Muskelschichten der Haut ab und bietet so einen multidimensionalen Ansatz.

Opatra PULSE ist ein nicht-invasives Hightech-Schönheitsgerät mit mehreren Aufgaben, das das Aussehen und die Gesundheit der Haut verbessert. Sorgfältig entwickelt, um das Aussehen der Haut bei regelmäßiger Anwendung sichtbar zu verbessern. Mit drei verschiedenen Behandlungsstufen für ein belebendes Gesichtstraining, das mit Hilfe von EMS, Infrarot mit LED-Therapie und Schallvibrationsmassage die Durchblutung anregt und die Haut sofort strahlen lässt. Das handgehaltene Schönheitsgerät ist multifunktional, da EMS die Gesichtsmuskeln mit Hilfe von elektrischem Niederspannungsstrom aktiviert und anhebt, um müde aussehende Haut eine dringend benötigte Straffung zu verleihen.

BITTE VERGESSEN SIE NICHT, IHR PRODUKT
AUF UNSERER WEBSITE ZU REGISTRIEREN:

www.opatra.com

ANWENDUNG

1. Schritt: Reinigen Sie das Gesicht gründlich und stellen Sie sicher, dass es frei von Schmutz, Öl und Make-up-Rückständen ist, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.

2. Schritt: Tragen Sie eine großzügige Menge des leitfähigen Gels auf die zu behandelnden Bereiche auf, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten und die Wirksamkeit der Behandlung zu maximieren.

3. Schritt: Beginnen Sie die Behandlung mit der niedrigsten Stufe des Geräts. Drücken und halten Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Gleiten Sie das Opatra PULSE-Gerät mit langsamen und festen Bewegungen entlang der Gesichtskonturen. Mit dieser Technik erzielen Sie die besten Ergebnisse. Nach zwei Wochen regelmäßiger Anwendung können Sie die Intensität schrittweise erhöhen.

4. Schritt: Führen Sie die Behandlung für eine Dauer von 10-20 Minuten durch. Wiederholen Sie die Behandlung 2-3-mal pro Woche und achten Sie darauf, dass sie jedes Mal gleich lang dauert. Konsistenz in der Behandlungshäufigkeit und -dauer optimiert die Ergebnisse.

5. Schritt: Vermeiden Sie die Behandlung der Hals- und Augenpartie mit dem Opatra PULSE-Gerät. Konzentrieren Sie sich bei der Behandlung auf die Bereiche des Gesichts, die auffällige Muskel- oder Fettpartien aufweisen. Auf diese Weise können Sie gezielt bestimmte Bereiche behandeln und die gewünschten Ergebnisse effektiv erzielen.

6. Schritt: Entfernen Sie das leitfähige Gel nach der Behandlung mit einer Reinigungscreme oder warmem Wasser von Ihrem Gesicht und fahren Sie zum Abschluss mit Ihrer üblichen morgendlichen oder abendlichen Selbstpflege fort.

**Wir empfehlen, das PULSE-Gerät mit einem leitfähigen Produkt auf Wasserbasis oder einem Produkt Ihrer Wahl zu verwenden*. Nachdem Sie das Produkt Ihrer Wahl aufgetragen haben, berühren Sie die Haut mit der Massagesonde und massieren sie mit Aufwärtsbewegungen.*

Wichtig

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise zur korrekten Bedienung und Verwendung des PULSE-Geräts von Opatra. Bitte bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.

Bei der Verwendung dieses Geräts sollten die unten aufgeführten grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Diese Liste ist nicht erschöpfend, aber sie trägt zu Ihrer Sicherheit bei und hilft Ihnen, die Lebensdauer der Produktgarantie zu erhalten.

GEFAHREN

- Halten Sie das Ladegerät und das USB-Kabel stets trocken. Tauchen Sie das Kabel oder den USB-Anschluss nicht ins Wasser.
- Laden Sie dieses Gerät nicht in einer feuchten Umgebung oder in der Nähe von fließendem Wasser auf.
- Entsorgen Sie das Beauty-Gerät und sein Zubehör nicht in einer brennbaren Umgebung.

WARNUNGEN

- Verwenden Sie das PULSE-Beautygerät zum Aufladen nur zusammen mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät, den Aufsatz oder das USB-Kabel nicht, wenn es beschädigt oder gebrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie es nur durch ein Original-Kabel, um weitere Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen unter 18 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Frauen, die schwanger sind oder stillen, wird die Verwendung dieses Beauty-Geräts nicht empfohlen.

Wichtig

Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck. Bei der Verwendung des Geräts sollten die unten aufgeführten grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Diese Liste ist nicht erschöpfend, aber sie hilft Ihnen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihres PULSE-Beauty Geräts zu verlängern.

VORSICHT

- Laden Sie das Gerät und das Zubehör auf und lagern Sie es bei einer Temperatur zwischen 5°C/40°F und 35°C/95°F.
- Verwenden Sie das PULSE Beauty Gerät nicht, wenn Sie Medikamente auf Steroidbasis einnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Ihre Haut noch von einem kosmetischen Eingriff erholt, wie z. B. einem chemischen oder mechanischen Peeling, einer Laser-Resurfacing-Behandlung, einer fraktionierten Laserbehandlung oder einer Mesotherapie-Behandlung oder einer anderen Behandlung mit Dermalfüllern innerhalb der letzten zwei Wochen.
- Machen Sie immer ein Allergieverdachtstest, bevor Sie das Gerät verwenden.

ALLGEMEINE TIPPS


- Die regelmäßige Reinigung des PULSE Beauty Geräts sorgt für optimale Ergebnisse und eine längere Lebensdauer des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf oder unter dem Einfluss von Medikamenten, die Schläfrigkeit verursachen können.

KONTRAINDIKATIONEN UND ANDERE WARNHINWEISE

- Legen Sie das Gerät nicht direkt auf Ihr Ohr, da dies zu einem vorübergehenden Hörverlust führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Probleme mit dem Ohr haben (Ohrinfektionen oder andere Anomalien).
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf rissiger Haut, offenen Wunden oder wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hautreizungen leiden, wie z. B. schwere Akne, Sonnenbrand, Hautinfektionen usw.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, ein implantiertes Instrument oder eine Metallprothese tragen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf der empfindlichen Haut um die Augen herum, da es sich um dünne und empfindliche Haut handelt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Schleimhäuten (z. B. in der Nase, im Mund oder im Genitalbereich), da dies zu lokalen Reizungen führen kann.


FUNKTIONEN

1. Strom-Modus: verbessert das Aussehen der Haut und Gesundheit Funktion.
2. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das PULSE-Beauty Gerät einzuschalten. Die 3 Stufen können mit der Stufentaste umgeschaltet werden.
3. Drücken und halten Sie die Power-Taste, um das Gerät auszuschalten.

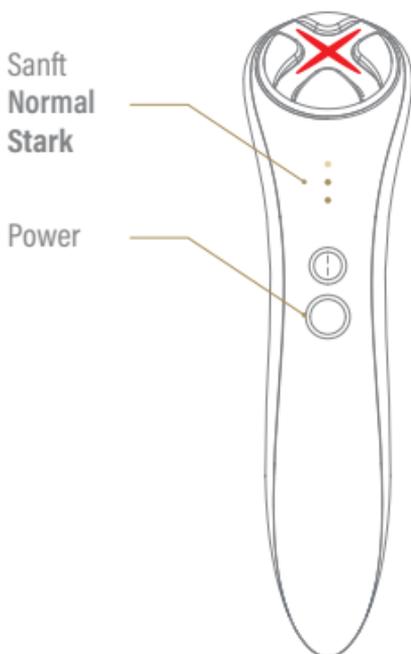

*Automatische Abschaltfunktion: Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.

LIEFERUNGSUMFANG

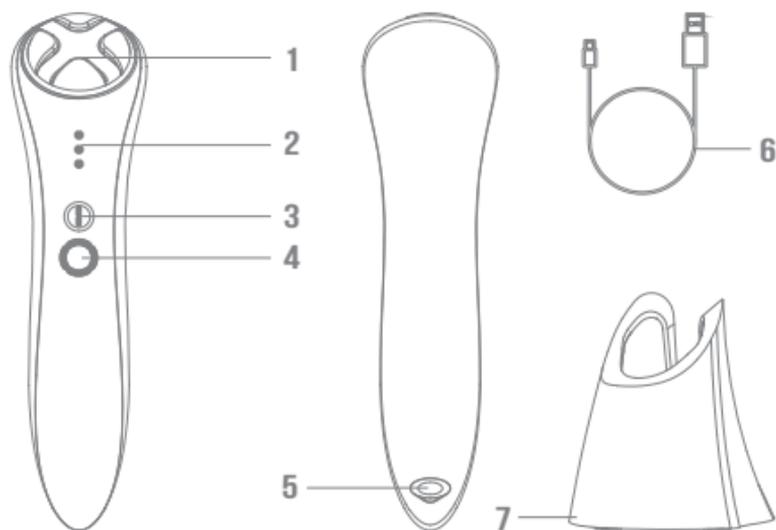

1. Massage-Sonde
2. Ganganzeige/Ladestandsanzeiger
3. Taste für den Gangwechsel
4. Ein/Aus-Knopf
5. Ladebuchse
6. USB-Kabel
7. Sockel

Der PULSE ist ein Hochleistungs-Schönheitsgerät, das multifunktionale EMS-, Infrarot-, LED- und Hochfrequenz-Schallvibrationen kombiniert, um mehrere Zeichen der Hautalterung gleichzeitig zu bekämpfen. Das Gerät unterstützt die Aufnahme von Hautpflegeprodukten in die Haut für optimale Ergebnisse.

ÜBER DIE BEHANDLUNGSFUNKTIONEN

Das handgehaltene Schönheitsgerät ist multifunktional: EMS hilft, die Gesichtsmuskeln mit elektrischem Niedervoltstrom zu aktivieren und anzuheben, um ein provisorisches, modelliertes Aussehen zu erzielen und müde aussehenden Hautpartien die dringend benötigte Straffung zu verleihen.

Die Sonic-Vibrationsmassage mit mehreren Vibrationen pro Minute unterstützt die Produktaufnahme und -penetration, indem sie die Produkte in die Haut drückt und die Lymphdrainage anregt, um die Vorteile der Opatra-Behandlung zu maximieren.

Die von Experten weltweit geschätzte LED- und Infrarot-Therapie nutzt Licht im sichtbaren und unsichtbaren Spektrum, das unter der Hautoberfläche wirkt, um die reparative Zellerneuerung und ATP-Regeneration zu fördern. Die verschiedenen Wellenlängen des Lichts arbeiten zusammen, um eine Reihe von Hautkrankheiten zu behandeln, und haben die Fähigkeit, tief unter die Hautoberfläche vorzudringen. Je größer die Wellenlänge des Lichts ist, desto größer ist auch die Eindringtiefe.

Die Kombination der Behandlungen wirkt harmonisch zusammen, um das Auftreten von Rötungen zu minimieren und gleichzeitig die raue Hautstruktur zu verbessern, die durch inneren oder äußeren Stress entstanden ist, um eine optimale Ausstrahlung wiederherzustellen.

PRODUKTANWENDUNG

Um das Gerät zu starten, drücken Sie die Einschalttaste 1,5 Sekunden lang, um die Behandlungsstufe 1 für EMS und Hochfrequenz-Schallvibration zu starten, oder drücken Sie die Stufentaste für die Behandlungsstufen 2 und 3 für Infrarot, LED mit Hochfrequenz-Schallvibration. Nach Abschluss der Behandlung schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Einschalttaste 1,5 Sekunden lang gedrückt halten. Für eine bessere Aufnahme der Hautpflegeprodukte tragen Sie eine gleichmäßige Schicht auf die Haut auf, bevor Sie das PULSE-Gerät einschalten und über die Haut gleiten lassen.

Gerätaufladung

1. Schließen Sie den Computer zum Laden mit einem USB-Ladekabel an: Schalten Sie den Computer ein, schließen Sie das USB-Ladekabel an die Ladebuchse des Computers an und verbinden Sie das Typ-C-Ende des Ladekabels mit der Ladebuchse des Geräts, um den Ladevorgang zu starten.
2. Mit Adapter aufladen: Schließen Sie das USB-Ladekabel an die Buchse des Adapters an und verbinden Sie das Typ-C-Ende des Ladekabels mit der Ladebuchse des Geräts, um den Ladevorgang zu starten. Spezifikationen des Adapters: 5V 1A
3. Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und die Anzeige leuchtet weiter (statisch), wenn sie vollständig geladen ist.

Vorsicht

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass die Ladebuchse trocken und frei von Wasser oder Hautpflegeprodukten ist. Laden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung auf, in der es in Wasser getaucht werden könnte. Verwenden Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht und achten Sie darauf, dass die Ladezeit NICHT länger als 24 Stunden dauert. Bitte verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Ladezubehör, um Probleme zu vermeiden.

GERÄTREINIGUNG

Die folgenden Wartungsanweisungen sind wichtig, um das ordnungsgemäße Funktionieren Ihres PULSE-Geräts zu gewährleisten. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht so effektiv oder es kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät kommen. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung Ihres Geräts, dass es an der Stromquelle ausgeschaltet ist.

- Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts nur ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Stahl, keine Wolle, keine Scheuermittel und keine ätzenden Flüssigkeiten wie Alkohol oder Aceton.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nach jedem Gebrauch gründlich, um die Leistung zu gewährleisten.
- Spülen Sie das Gerät nicht unter dem Wasserhahn ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder mit dem Ladekabel verbinden.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

BEGRENZTE LEBENSLANGE GARANTIE

Dieses Produkt wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert. Sollte Ihr Opatra PULSE Gerät innerhalb eines Jahres nach dem Kauf defekt sein, senden Sie es bitte zusammen mit Ihrer Quittung zurück. Wir werden das Gerät für Sie reparieren.

Die Reparatur ist kostenlos, vorausgesetzt, Sie haben Ihr Opatra PULSE-Gerät entsprechend der Gebrauchsanweisung betrieben.

Die Garantie deckt KEINE Brüche oder Schäden ab, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

- ▶ Normaler Verschleiß des Geräts
- ▶ Missbrauch oder falsche Behandlung - Nichtbeachtung der Betriebsanleitung/des Benutzerhandbuch.
- ▶ Unsachgemäße oder nicht autorisierte Reparaturen am Gerät.

Wenn Sie einen Defekt feststellen, informieren Sie bitte Opatra, und wir werden das Gerät für Sie reparieren. Die Reparatur ist kostenlos, sofern Sie Ihr Gerät gemäß der Bedienungsanleitung betrieben haben.

Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.

Bitte bewahren Sie daher den Originalkaufbeleg für die Dauer der Garantiezeit auf.

UMWELT

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsmüll, sondern geben Sie es bei einem Recyclinghof ab. Auf diese Weise tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.

SPEZIFIKATIONEN

MODELLNUMMER: OP-PLS-23

MATERIALIEN: ABS-Kunststoff/Zinklegierung/Edelstahl

GRÖSSE: Griff - 181*46,5*40,2 mm, Sockel - 80*67,5*76,5 mm

GEWICHT: Griff - ca. 250 g, Sockel - ca. 130 g

BATTERIE: Li-Ion 900 mAh 3,7 V

LADEZEIT: ca. 3 Stunden

BENUTZUNGSDAUER FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE LADUNG: bis zu 1 Stunde

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Benutzung dieses Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder wir noch unsere Händler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für Verletzungen oder Schäden, physischer oder anderer Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses PULSE-Geräts resultieren. Des weiteren behalten wir uns das Recht vor, dieses Handbuch zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen am Inhalt vorzunehmen, ohne dass wir verpflichtet sind, irgendjemanden über eine solche Überarbeitung oder Änderung zu informieren. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie umfassendere Informationen wünschen, einschließlich aktualisierter Benutzerhandbücher, Kundenkommentare, häufig gestellte Fragen usw.



PULSE

Bevor Sie das Gerät auf Ihrer Haut anwenden, empfehlen wir Ihnen, immer zuerst einen Allergieverdachtstest durchzuführen. So können Sie sicherstellen, dass Sie keine unerwünschten Reaktionen auf das Gerät haben und dass Ihre Haut es verträgt.

HIER SIND DIE SCHRITTE ZUR DURCHFÜHRUNG EINES PFLASTERTESTS:

- Wählen Sie eine kleine, unauffällige Hautpartie (vermeiden Sie Ohren, Hals, Augen und Lippen). Achten Sie darauf, dass die Stelle sauber und trocken ist.
- Tragen Sie das Gerät auf die kleine Hautstelle auf, wie in der Gebrauchsanweisung des Geräts beschrieben.
- Warten Sie 24 Stunden lang und beobachten Sie Ihre Haut auf Veränderungen. Wenn Sie Rötungen, Juckreiz oder Reizungen feststellen, waschen Sie die Stelle gründlich und verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn keine unerwünschten Reaktionen auftreten, können Sie das Gerät wie vorgeschrieben verwenden.
- Wenn Sie empfindliche Haut haben, sollten Sie vor der Anwendung des Geräts einen Dermatologen konsultieren, um mögliche Probleme zu vermeiden.
- Denken Sie daran, immer die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung zu befolgen, um Ihr Schönheitsgerät sicher zu verwenden.



OPATRA KONTAKT

E: info@opatra.com

T: +44 (0) 207 998 5708

W: opatra.com