

GLO24K Hals- und Gesichtsmassagegerät+ (USB aufgeladen)
Artikel-Nr.: BD2

GLO24K
UNLEASH THE POWER OF GOLD



Wichtige Erinnerung: Bitte vor der ersten Verwendung vollständig aufladen und zwischen den Anwendungen wieder aufladen.

Inhalt

Page

- 1
- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 6
- 7

Produktspezifikationen

Anleitung zu den 3 Modi

Patent

Produktmerkmale

Wie man es am Hals verwendet

Wie man es im Gesicht verwendet


Wie man es reinigt

Vorsichtsmaßnahmen

Q&A

Technische Informationen

Produktspezifikationen

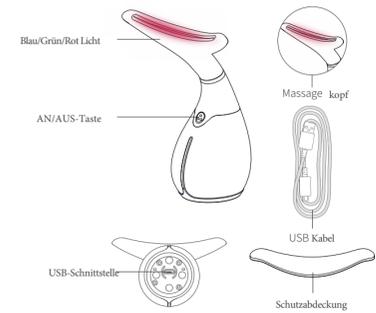

Anleitung zu den 3 Modi



Page 1

Patent



1. Erscheinungsbild-Patent US 0876,623 S
2. Erscheinungsbild-Patent 003539014-0001
3. Erscheinungsbild-Patent 50-0965353



Blau Licht - mit Hautpflege verbunden und kann das allgemeine Hautbild verbessern. Blaues Licht kann auch die Hautelastizität verbessern und die Poren verfeinern und reduzieren. Blaues Licht eignet sich für fettige und empfindliche Haut.



Grün Licht - kann bei der Hautfarbe und Beruhigung des Hautbereichs helfen. Es hat auch den Effekt des Ausgleichs und der Glättung der Haut.



Rotes Licht - mit alterswidrigen Eigenschaften verbunden und kann die Vitalität der Hautzellen erhöhen, was die Blutzirkulation verbessert, die Synthese von Kollagen fördert. Rotes Licht wird auch mit der Verbesserung des allgemeinen Hautbildes in Verbindung gebracht.

Page 2

Produktmerkmale

Dieses Produkt ist ergonomisch für die Anwendung im Nacken- und Gesichtsbereich konzipiert. Es verwendet Technologie, die Hochgeschwindigkeitsmassage, LED-Lichttherapie und Thermotherapie kombiniert.

Der geschwungene Massagekopf ist speziell für Schultern, Nacken, Gesicht und andere Körperteile konzipiert. Seine einzigartige Form leitet die Energie des Geräts direkt in die Haut.

Die Wärmekapazität der Massageköpfe erreicht ca. 45°C, um die Zellen der Haut zu aktivieren, und entspricht den 3 IPL-Akustikmodi, niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeiten mit 3 jeweiligen LED-Lichtfarben von Blau, Grün und Rot, die die Blutzirkulation fördern und den Stoffwechsel unterstützen können, helfen bei der Ausscheidung von Giftstoffen und Abfall, stimulieren die Akupunkturpunkte im Nackenbereich und unterstützen die Wiederbelebung der Haut für ein revitalisiertes Erscheinungsbild.

3 Sonic/Massage-Modi: Niedrige Geschwindigkeit (Blau), Mittlere Geschwindigkeit (Grün), Hohe Geschwindigkeit (Rot), die alle durch eine intelligente Touch-Sensor-Technologie aktiviert werden, das heißt, der Massagekopf beginnt nur bei Kontakt mit der Haut zu arbeiten.

Modus-Speicherfunktion mit 60-Sekunden-Erinnerungsfunktion.

Bequemes USB-Kabel-Laden.

Klein, leicht und tragbar, kann überall und jederzeit verwendet werden.

Modernes Design.

Select your preference mode (blue/green/red) and apply the massager on the skin in upwards/downwards motions. Use the massager on the back and front of the neck. Massage all acupuncture points in upwards/downwards motions. Use for 5-10 minutes at a time.

Page 3

Wie man es am Nacken verwendet

Tragen Sie eine kleine Menge Hautpflegecreme auf den Nacken auf. Massieren Sie, bis sie vollständig eingezogen ist.

Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus (Blau/Grün/Rot) und tragen Sie das Massagegerät in aufwärts/abwärts gerichteten Bewegungen auf die Haut auf.

Verwenden Sie das Massagegerät auf der Rückseite und Vorderseite des Nackens. Massieren Sie alle Akupunkturpunkte in aufwärts/abwärts gerichteten Bewegungen. Verwenden Sie es 5-10 Minuten lang.

Wie man es im Gesicht verwendet

1. Tragen Sie eine kleine Menge Hautpflegecreme auf die saubere Haut auf. Massieren Sie, bis sie vollständig eingezogen ist.
2. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus (Blau/Grün/Rot) und tragen Sie das Massagegerät in aufwärts/abwärts gerichteten Bewegungen auf die Haut auf.
3. Massieren Sie alle Akupunkturpunkte in aufwärts/abwärts gerichteten Bewegungen um die Form Ihres Gesichts herum. Verwenden Sie es 5-10 Minuten lang.

Wie man es reinigt

Drücken Sie die AN/AUS-Taste eine Sekunde lang, um das Massagegerät auszuschalten. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch ab. Schließen Sie die Schutzabdeckung und stellen Sie sie an einem belüfteten trockenen Ort ab.

Page 4

Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor der Verwendung bitte das Produkthandbuch und bewahren Sie es für zukünftige Verwendung auf.
2. Verwenden Sie das im Karton enthaltene USB-Kabel. Die Ladezeit von leer bis voll beträgt etwa 2 Stunden.
3. Bei Batteriemangel blinkt das Produkt rot, beim Laden blinkt es blau. Wenn das blaue Licht aufleuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
4. Das Produkt verfügt über eine Modus-Speicherfunktion. Wenn es eingeschaltet wird, wird es automatisch in den zuletzt gewählten Modus wechseln.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
6. Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Hautreizungen oder Schwellungen auftreten.
7. Das Produkt ist nicht wasserdicht; bitte setzen Sie es nicht Wasser aus.
8. Legen Sie das Produkt an einen trockenen und belüfteten Ort, um direktes Sonnenlicht zu vermeiden, und stellen Sie sicher, dass keine korrosiven Chemikalien in der Nähe sind.
9. Das Reinigungstuch besteht aus hochwertigem Fleece-Material und kann wiederholt gewaschen werden.
10. Freundliche Erinnerung: Bitte verwenden Sie mäßige Hautpflegeprodukte. Übermäßige Hautpflegeprodukte können nicht vollständig absorbiert werden. Im Gegensatz dazu könnte das Übriggebliebene möglicherweise in das Massagegerät eindringen und es beschädigen. Bitte reinigen Sie das Massagegerät rechtzeitig mit dem Reinigungstuch nach Gebrauch.
11. Nach einer langen Lernaufzeit benötigt das Massagegerät etwa 15 Minuten Ladezeit, um wieder aktiviert zu werden (die Anzeige leuchtet blau).
12. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
13. Nicht direkt auf die Augen auftragen.
14. Nicht verwenden bei Schwangerschaft, Epilepsie, Diabetes, aktivem Krebs, Herzproblemen, Herzschrittmacher oder schweren medizinischen Zuständen.

Page 5



Das Produkt benötigt 15 Minuten, um sich im Ladezustand zu befinden.



Das Produkt benötigt 15 Minuten, um sich im Ladezustand zu befinden.

GLO24K bietet eine beschränkte Garantie für seine LED-Schönheitsprodukte (Website für Details überprüfen).

Q&A

Frage	Antwort
Das Produkt hat plötzlich keine Vibration, funktioniert nicht. Was ist der Grund?	Überprüfen Sie, ob der Produktelektrizität mangelhaft ist oder nicht. Laden Sie das Produkt auf. Überprüfen Sie, ob das Produkt korrekt startet. Starten Sie das Produkt neu, nachdem Sie es ausgeschaltet haben. Bitte kontaktieren Sie GLO24K, um sich mit dem Hersteller zu beraten.
Kann ich dieses Produkt jeden Tag verwenden?	Ja, die Vibrationsintensität und Temperaturregulation dieses Produkts sind intelligent von einem professionellen Team entworfen und können mehrmals täglich verwendet werden.

Page 6

Frage	Antwort
Ich leide an Allergien. Kann ich das Produkt verwenden?	Ja. Dieses Produkt besteht aus Materialien höchster Standards, die als sicher gelten und keine Hautreizungen verursachen. In seltenen Fällen von Hautreizungen, Allergien oder Unbehagen sollten Sie die Verwendung des Produkts einstellen und den Hersteller kontaktieren.
Was ist die empfohlene Nutzung des Produkts?	Die empfohlene Anwendungsdauer des Produkts liegt bei 5-10 Minuten, jederzeit an jedem gewünschten Tag.

Technische Informationen:

Product name	GLO24K Hals- und Gesichtsmassagegerät+ BD2
Model	BD2
Spannung	5V ===
Leistung	3W
Batterie:	Lithium
Batterietyp	Lithium
Anzahl der Batterien	1
Gewicht der Batterie	19±0.3
Zellen pro Batterie	1
Wattstunden pro Batterie	2.4wh
Lithiumgehalt in Gramm	0.195

Page 7

GLO24K
UNLEASH THE POWER OF GOLD



Für weitere Informationen über das Produkt besuchen Sie bitte WWW.GLO24K.COM
Vertrieb durch Y&E Ent., LLC
Atlanta, GA 30338, USA
71-75 Shelton Street, London, UK
Hauptstrasse 22, Neugersdorf 02727, Deutschland

a ventilated dry environment.