



**Um die Ergebnisse zu maximieren, scannen Sie hier.  
Weitere Informationen zum Gerät,  
bitte besuchen Sie: [WWW.GLO24.COM](http://WWW.GLO24.COM)**

**GLO24K**  
UNLEASH THE POWER OF GOLD



## **Hautverjüngungs-Schönheitsgerät**

Benutzerhandbuch

Um Ihre Ergebnisse zu maximieren, lesen Sie die Rückseite dieses Handbuchs.

## Schönheitsgerät zur Hautverjüngung

Das GLO24K Hautverjüngungsgerät ist ein fortschrittliches Gerät mit dreifacher Wirkung, dass die Haut verjüngt und Ihr ein strahlendes Aussehen verleiht. Dieses Beauty-Tool ist mit einem hochmodernen "roten LED-Licht", einer sanften temperaturgesteuerten Heizung und einer Vibrationstechnologie ausgestattet, um die Haut zu revitalisieren, wiederzubeleben und zu verjüngen, um ein makellooses, strahlendes und jugendliches Aussehen zu erzielen. Genießen Sie das Spa-at-Home-Erlebnis mit GLO24K.

Dreifache Wirkung:

- LED-Licht
- Temperaturgesteuerte Lichtheizung (40 °C)
- Schwingung

Anmerkung:

1. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es verwenden.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, sollten Sie es vor der Benutzung voll aufladen.
3. Die volle Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.
4. Die automatische Abschaltung wird aus Sicherheitsgründen nach 15 Minuten Dauerbetrieb eingestellt.




## Produkteigenschaften

### LED-Funktion zur Hautverjüngung

Die LED-Funktion (*Light Emitting Diode*) ist eine Technologie, die häufig in der Hautpflege- und Schönheitsindustrie verwendet wird und mit mehreren Vorteilen für die Hautpflege verbunden ist, einschließlich Anti-Aging.

Stimuliert die Hautverjüngung.

Kann beim Ausgleich und der Straffung der Haut und beim Anti-Aging für ein strahlendes Aussehen helfen.

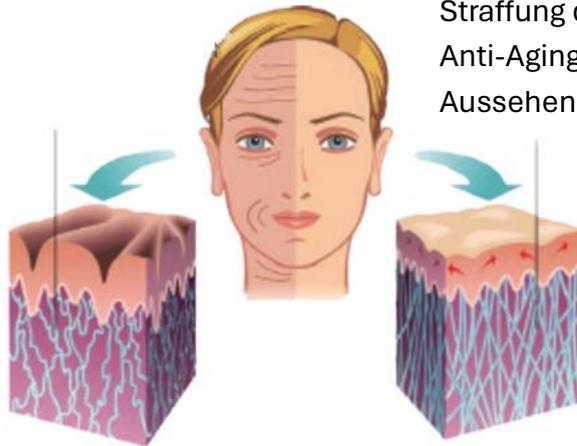

### Temperaturgesteuerte Lichterwärmung und Vibration.

Das GLO24K Hautverjüngungs-Schönheitsgerät nutzt neben der LED-Funktion eine temperaturgesteuerte Lichterwärmung und Vibrationstechnologien (Massage), die beide mit Hautpflegevorteilen für ein schöneres und revitalisiertes Aussehen verbunden sind.




Schönheitsgerät zur Hautverjüngung

## Ihr Gerät

40°C +/-1°C

Massagekopf

Drücken Sie die A-Taste (kurz drücken), um das Gerät ein- oder auszuschalten. Eine blaue Kontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet und verwendet werden kann.

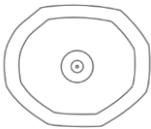

Direktes Aufladen

Oder

Sie können mit der Ladestation aufladen.



Kontrollleuchte

1. Drücken Sie die B-Taste, um die Heizungs-, Vibrations- und LED-Lichtfunktionen zu aktivieren (das rote Licht leuchtet auf). HINWEIS: Dieses Gerät verfügt über eine "Touch"-Sensortechnologie. Diese funktioniert nur, wenn sie mit Ihrer Haut in Berührung kommt.

2. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste B, um wieder in den Standby-Modus zu wechseln. Drücken Sie die A-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Ladestation

Stellen Sie das Gerät auf den Sockel und stellen Sie sicher, dass es vor der Verwendung an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Sie können dieses Gerät direkt an der Unterseite aufladen, oder indem Sie es auf die Ladestation stellen.

## Gerätverwendung



1. Reinigen Sie Ihr Gesicht, entfernen Sie Schminke und tragen Sie das Gerät nur auf trockene, saubere Haut auf.



2. Drücken Sie die A-Taste, um das Gerät einzuschalten. Dann wird der Standby-Modus aktiviert (ein blaues Licht leuchtet auf).



3. Drücken Sie die B-Taste, um die Heiz-, Vibrations- und LED-Funktionen zu starten (das rote Licht leuchtet auf). Sobald Sie mit Ihrer Haut in Berührung kommen, sind diese Funktionen eingeschaltet und der Gerätekopf erwärmt sich allmählich.



4. Massieren Sie Ihr Gesicht sanft, indem Sie das Gerät in Auf-/Abwärts- und kreisenden Bewegungen über die betroffenen Stellen gleiten lassen. Es wird eine 10- bis 15-minütige Anwendung empfohlen, 2–3-mal pro Woche.



5. Drücken Sie die B-Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln.



6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die A-Taste (mit kurzem Drücken). Für beste Ergebnisse tragen Sie nach jeder Anwendung des Geräts eine Feuchtigkeitscreme auf.

**Tipp:** Die oben genannten Hautpflegemethoden können je nach Bedarf angepasst werden.

## Hinweise und Sicherheitstipps

1. Dieses Produkt wird nur für Erwachsene empfohlen. Halten Sie es von Kindern fern.
2. Nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch reinigen. Waschen Sie es nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und verwenden Sie keine Reinigungschemikalien. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
3. Dieses Gerät verwendet einen intelligenten, empfindlichen "Berührungssensor", sodass es nur funktioniert, wenn der Massagekopf die Haut direkt berührt und das Gerät eingeschaltet ist.
4. Vermeiden Sie es, das Gerät zu lange auf einem Hautbereich zu halten. Bewegen Sie das Gerät kontinuierlich in kreisenden und Aufwärts-/Abwärtsbewegungen um die Haut.
5. Schließen Sie während der Anwendung die Augen, um Beschwerden zu vermeiden.
6. Tragen Sie dieses Gerät nicht direkt auf die Augen auf. Es ist nur für die Anwendung auf der Haut von Gesicht, Hals und Augenpartie konzipiert.
7. Verwenden Sie es nach Ihren Bedürfnissen. Jede Anwendung wird zwischen 10 bis 15 Minuten empfohlen, 2–3-mal pro Woche.
8. Im seltenen Fall von Beschwerden oder Empfindlichkeit, verwenden Sie dieses Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst.
9. Wenn Sie an einer Krankheit leiden (z. B. Herzschrittmacher, Epilepsie, Schwangerschaft, schwere Erkrankungen usw.), konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## Produktparameter

Modell: BD1	Material: ABS + Edelstahl
Produktgröße: 200*46.5*29.5mm	Nettogewicht: 240g
Batteriekapazität: 1100mAh	Arbeitsspannung: 7.4V
Arbeitsstrom: <1.5A	Betriebsspannung: 40°C +/-1°C
Nutzungszeit: 10-15 Min/pro Anwendung	Die automatische Abschaltung erfolgt aus Sicherheitsgründen nach 15 Minuten.

**Aufladen:** Während des Ladevorgangs blinkt eine Kontrollleuchte. Bei voller Ladung leuchtet ein blaues Licht auf.

\*Hinweis: Dieses Gerät ist aus Sicherheitsgründen auf eine automatische Abschaltung nach 15 Minuten eingestellt.

\*Die Ladezeiten können bei schwachem Akku ca. 2-3 Stunden dauern.

\*Blinkende Lichter bei eingeschaltetem Gerät zeigen an, dass der Akku schwach ist. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, wenn der Akku schwach ist, laden Sie es auf.

**Produktzubehör:** Infrarotlicht-Schönheitsgerät x1, Ladestation x1, Ladekabel x1, Benutzerhandbuch x1.

## Reparatur und Wartung

Vergewissern Sie sich zum Reinigen des Geräts, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Reinigen Sie das Gerät zwischen den Anwendungen mit einem weichen, trockenen Tuch.

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht und auch nicht wasserfest. Waschen Sie es nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ab.

Legen Sie das Gerät nach dem Gebrauch an einen sicheren Ort. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeit zu vermeiden.

Laden Sie das Gerät zwischen den Anwendungen auf.

Wenn ein Problem mit der Funktionalität des Geräts auftritt, beachten Sie bitte die folgende Tabelle. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an das Produkt-Service-Center. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

Fehlererscheinung	Mögliche Ursache	Verfahren der Handhabung
Die Lichttherapie / das Gerät wirkt nicht auf der Haut.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät die Haut berührt.	Stellen Sie Ihre Mimik neu ein, bevor Sie das Gerät auf Ihr Gesicht setzen.
Das Gerät blinkt, kann sich aber nicht einschalten oder funktioniert nicht.	Batterie leer	Bitte versuchen Sie es mit dem Aufladen, die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.
Die Geräteleuchten funktionieren nicht.	Gerät muss neu gestartet werden	Schalten Sie das Gerät aus. Ein paar Minuten warten, dann aufladen und wieder einschalten.
Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.	Die automatische Abschaltung ist aus Sicherheitsgründen auf 15 Minuten eingestellt	Warten Sie einige Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein.